


MATRACE



Vysoko kvalitné zdravotné matrace, spĺňajúce EU normy a klinické testy vo Fakultných nemocniciach, ocenené opakovane cenami Zlatá Incheba na veľtrhoch v Brne. Možnosť atypických rozmerov.

Riziko dekubitov 0.st

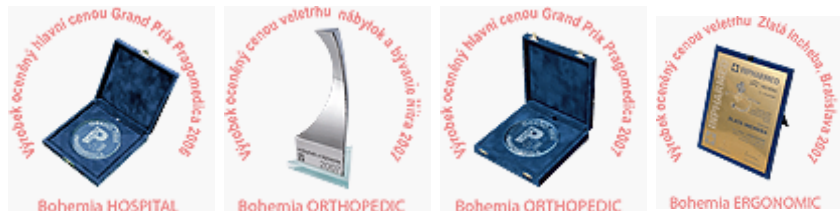

Zdravotný matrac bez antidekubitného efektu Sendvič -


- kvalitný veľmi obľúbený matrac sendvičového typu, vhodný pre použitie v zdravotníctve u pacientov, kde nie je riziko vzniku dekubitov. Jadro matraca je 14cm vysoké, medzi vrstvy tvarovanej 7 zónovej polyuretánovej peny je vložená doska RE peny, ktorá zaručuje zvýšenú nosnosť tohto matraca. Ložná plocha je zónovane vrúbkovaná pre lepšie prevzdušnenie a ľahkú masáž tela. Poťah SAFR

je snímateľný so zipsom, možnosť prania na 95stC, vodeodolný, vzdušný, so zníženou horľavosťou a pružný vo všetkých štyroch smeroch.

Ekomedic



Norm

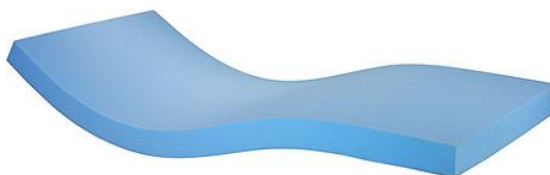

Riziko dekubitov I-II.st.



Zdravotný matrac LUX je navrhnutý pre pacientov s nízkym stupňom rizika vzniku dekubitov **I.-II.st.** Jadro matraca je štandardne 12 cm vysoké, je vyrobené z teplej alebo studenej PUR peny, pozdĺžne aj priečne prerezané, rozdelené do troch anatomických zón, čím je zabezpečené rovnomerné rozloženie hmotnosti pacienta. Prierezy v matraci zabezpečujú cirkuláciu vzduchu a zároveň chránia pacienta pred vlhkosťou a prehriatím. Rozmer 90x200 cm. Poťah

SAFR je snímateľný so zipsom, možnosť prania na 95stC, vodeodolný, vzdušný, so zníženou horľavosťou a pružný vo všetkých štyroch smeroch.

Lux flex, lux duo flex,



Lux duo



Matrace Lux Flex - s zosilneným okrajom pre uľahčenie vstávania z lôžka.

Riziko dekubitov II.-III.st



Zdravotný matrac Clinic – je navrhnutý pre pacientov so stredným stupňom rizika vzniku dekubitov **II.-III.st.** Jadro matraca je štandardne 13cm vysoké, vyrába sa zo studenej PUR peny. V ložnej ploche matraca je vykonaný revolučný prierez /chránený vzor/, ktorý zabezpečuje veľkú roznášaciu schopnosť vďaka výkyvným, vo všetkých smeroch a nezávisle, reagujúcim podperným štvorčekom. Tieto celou svojou plochou kopírujú kontúry tela a tým znižujú tlaky na

tkanivá. Zväčšené prierezy v matraci zabezpečujú lepšiu cirkuláciu vzduchu, odvod pary a zároveň viac chránia pacienta pred vlhkosťou a prehriatím.

Poťah SAFR je snímateľný so zipsom, možnosť prania na 95stC, vode odolný, vzdušný, so zníženou horľavosťou a pružný vo všetkých štyroch smeroch.

Hospital



Prevent



Eulastic



Riziko dekubitov III.-VI.st



Zdravotný matrac Ergonomic – je navrhnutý pre pacientov s vysokým stupňom rizika vzniku dekubitov **III.-IV.st**. Jadro matraca je 14cm vysoké, je vyrobené zo studenej PUR peny v základni matraca a termoaktívnej /lenivej/ peny v ložnej ploche.

Táto lenivá pena má výrazné antidekubitné vlastnosti. Ložná plocha je pozdĺžne aj priečne prerezaná a rozdelená do 7 anatomických zón, čím je zabezpečené rovnomerné rozloženie hmotnosti pacienta. Prierezy v matraci zabezpečujú

cirkuláciu vzduchu, odvádzajú pary a zároveň chránia pacienta pred vlhkosťou a prehriatím. Poťah SAFR je snímateľný so zipsom, možnosť prania na 95stC, vode odolný, vzdušný, so zníženou horľavosťou a pružný vo všetkých štyroch smeroch.


Matrac ocenený zlatou inchebou 2007.

Vysoko luxusný 5 zónový matrac je vyrobený z komfortnej studenej peny a z termoaktívnej peny. Jedná sa o unikátnu penu, ktorej tvrdosť sa mení v závislosti na teplote, čím dochádza k exkluzívnemu rozložению tlaku matraca na tkanivá, čo má pozitívny vplyv na krvný obeh regeneráciu svalov. Právom je tento matrac označovaný za vrchol kvality a komfortu.

Vynikajúci pre každého najmä pri bolestiach chrbtice.



Eucatherm

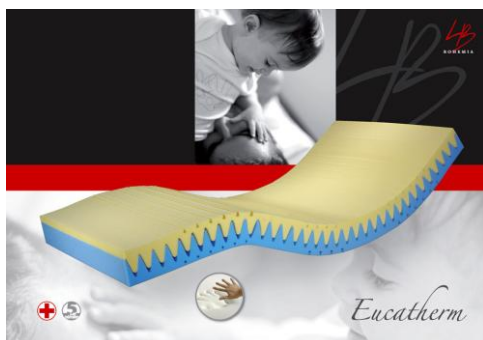

Orthopedic



PRIKRÝVKY A VANKÚŠE Medico

Použité materiály Medico 95st C: povrch tvorí sypkovina 100% polyesterové mikrovláknó. Náplň je 100% polyesterové konjugované duté vlákno, vo vankúšoch je stočené do maličkých guľičiek, ktoré zaručia pružnosť a tvarovú stálosť vankúša. /umelé perie/. Kolekcia medico svojím materiálovým zložením a finálnou úpravou umožňuje prať výrobky až do teploty 95St C, čím je zaručená úplná likvidácia roztočov a 100% hygiena lôžka. Sušenie je možné pri bežnej teplote do 60st C. U výrobkov medico sú používané značkové konjugované vlákna od firmy Wellmann, Irsko. Vďaka tomu sú výrobky veľmi ľahké, vzdušné, nadýchané a majú veľmi dobré tepelné vlastnosti. V porovnaní s používanými prírodnými materiálmi, ako napríklad perie, ovčie rúno a pod, nevytvára duté polyesterové vlákno prostredie pre prachové roztoče spôsobujúce alergie. Kvalitu potvrdzuje množstvo spokojných klientov z radov bežných občanov ale aj oddelení v nemocniciach a domovoch dôchodcov.

Prikrývka 95st C 135x200 1000gr.

Prikrývka 95st C 135x200 1200gr

Vankúš 70x90 800gr

Vankúš 70x90 870gr

